

Nr kat.	Opis	Kanały pomiarowe	Podłączenie drukarki	Podłączenie czytnika kodów	Podłączenie do sieci informatycznej	Wynik met. Westergrena po 1 godz. po 15 min.	Wynik met. Westergrena po 1 godz. po 30 min.	Wynik met. Westergrena po 1 i 2 godz. po 60 min.	Przewidywanie wyniku	Kontrola jakości	Funkcja Auto-test
Analizatory do oznaczania OB											
836580	Sed Rate Screener 100/II (SRS 11/II)	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
836587	Sed Rate Screener 20/II (SRS 20/II)	20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
836592	Sed Rate Timer 10/II (SRT 10/II)	10	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✓

Nr kat.	Opis	Opakowanie	
		jednostkowe	zbiorcze
Akcesoria			
836582	Drukarka termiczna dla SRS 20/II i SRS 100/II	1 szt.	1 szt.
836283	Czytnik kodów kreskowych dla SRS 20/II i SRS 100/II	1 szt.	1 szt.
836585	Rolka papieru termoczułego dla drukarki 836582 i zintegrowanych drukarek w 836580 i 836587	1 szt.	1 szt.
836588	Zestaw kontrolny do OB do SRT 10/II, SRS 20/II i SRS 100/II	1 szt.	1 szt.
836577	MultiMixer VACUETTE® do probówek VACUETTE® (statywy nie są dołączone)	1 szt.	1 szt.
836578	Statyw do MultiMixera VACUETTE® na 20 probówek 9 mm	1 szt.	1 szt.
836579	Statyw do MultiMixera VACUETTE® na 20 probówek 13 mm	1 szt.	1 szt.

Nr kat.	Opis	Opakowanie	
		jednostkowe	zbiorcze
Probówki			
729073	Probówka VACUETTE® 1,5 ml 4NC do OB z 3,2% cytrynianem sodu 9x120 mm, czarny korek, PP	50 szt.	800 szt.

Dalsze informacje wraz z instrukcjami do aparatów do oznaczania OB można znaleźć na stronie www.gbo.com/preanalytics



Austria (Main Office)

Greiner Bio-One GmbH
Phone +43 7583 6791-0
Fax +43 7583 6318
E-Mail office@at.gbo.com

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.gbo.com/preanalytics.

Brazil

Greiner Bio-One Brasil
Phone +55 19 3468-9600
Fax +55 19 3468-9621
E-Mail office@br.gbo.com

Hungary

Greiner Bio-One Hungary Kft.
Phone +36 96 213 088
Fax +36 96 213 198
E-Mail office@hu.gbo.com

Netherlands

Greiner Bio-One B.V.
Phone +31 172 4209 00
Fax +31 172 4438 01
E-Mail info@nl.gbo.com

Turkey

Greiner Bio-One Turkey
Laboratuvar Ürünleri LTD. ŞTİ
Phone +90 216 576 6004
Fax +90 216 576 6005
E-Mail office@tr.gbo.com

China

Greiner Bio-One Suns Co., Ltd.
Phone +86 10 83 55 19 91
Fax +86 10 63 56 69 00
E-Mail office@cn.gbo.com

India

Greiner Bio-One INDIA Pvt., Ltd.
Phone +91 120 456 8787
Fax +91 120 456 8788
E-Mail info@gboindia.com

Spain

VACUETTE Espana S.A.
Phone +34 91 652 77 07
Fax +34 91 652 33 35
E-Mail info@vacuette.es

United Kingdom

Greiner Bio-One Ltd.
Phone +44 1453 8252 55
Fax +44 1453 8262 66
E-Mail info@uk.gbo.com

France

Greiner Bio-One SAS
Phone +33 1 69 86 25 25
Fax +33 1 69 86 25 35
E-Mail office@fr.gbo.com

Italy

Greiner Bio-One Italia S.r.l.
Phone +39 02 9438 3340
Fax +39 02 9438 3366
E-Mail office@it.gbo.com

Switzerland

Greiner Bio-One VACUETTE
Schweiz GmbH
Phone +41 7 12 28 55 22
Fax +41 7 12 28 55 21
E-Mail office@ch.gbo.com

USA

Greiner Bio-One North America Inc.
Phone +1 704 261-7800
Fax +1 704 261-7899
E-Mail info@us.gbo.com

Germany

Greiner Bio-One GmbH/Preanalytics
Phone +49 7022 948-0
Fax +49 7022 948-514
E-Mail office@de.gbo.com

Japan

Greiner Bio-One Co. Ltd.
Phone +81 3 3505 8875
Fax +81 3 3505 8945
E-Mail info@jp.gbo.com

Thailand

Greiner Bio-One Thailand Ltd
Phone +66 38 4656 33
Fax +66 38 4656 36
E-Mail office@th.gbo.com

Your **Power** for Health


greiner bio-one



VACUETTE®

Automatyczne systemy oznaczania OB

Praktyczne, Bezpieczne,
Oszczędzające czas...

www.gbo.com/preanalytics



VACUETTE® Analizatory do oznaczania opadu erytrocytów (OB)

VACUETTE® Automatyczne systemy oznaczania OB

Optymalizacja kosztów jest jednym z istotnych aspektów codziennej pracy oddziałów szpitalnych, laboratoriów i gabinetów lekarskich. Centralizacja oznaczania OB pozostaje ważnym krokiem w stronę poprawy efektywności ekonomicznej.

Automatyczne analizatory **VACUETTE®** do oznaczania OB firmy Greiner Bio-One są w tym pomocne. Dzięki skróconemu pomiarowi zyskasz czas, a probówki **VACUETTE®** do OB wykonanie z trwałego plastiku podniosą bezpieczeństwo pracy w twoim laboratorium.

Cały system oferuje korzyści:

Analizatory do OB

- Proste menu ekranowe dla wygody użytkownika*
- Zintegrowane plastikowe pokrywy chronią kanały pomiarowe przed kurzem*
- Wydajny silnik pracuje bardzo cicho
- Dostępność różnych czasów pomiaru umożliwia oznaczenie dużej ilości próbek
- Funkcja Auto-test sprawdza gotowość aparatu do pracy
- Wyniki są automatycznie korygowane do 18°C
- Program do kontroli jakości
- Czas pozostały do końca oznaczenia jest widoczny na ekranie
- Zamknięty system oznaczania OB służy bezpiecznej pracy

*Seria SRS


Probówki do OB

- Pierwsza próżniowa probówka do OB na świecie zrobiona z wyjątkowo trwałego polipropylenu (PP)
- Przeznaczone do pracy z trzema modelami naszych aparatów
- Wysoki poziom bezpieczeństwa w porównaniu z probówkami ze szkła




Jeszcze większa efektywność połączona z wygodą użytkowania

Probówki mogą być wstawiane do aparatu w dowolnym momencie, również w czasie wykonywania oznaczeń. Próbkę są oznaczane niezależnie od siebie, co optymalizuje płynność pracy. Przed rozpoczęciem pomiaru aparat sprawdza poziom napełnienia probówek. Możesz przyspieszyć pracę, wybierając różne czasy pomiaru: 15 lub 30 minut. W każdym przypadku uzyskasz wynik zgodny z metodą Westergrena po 1 godzinie, osiągając tym samym nawet 4 razy większą wydajność.

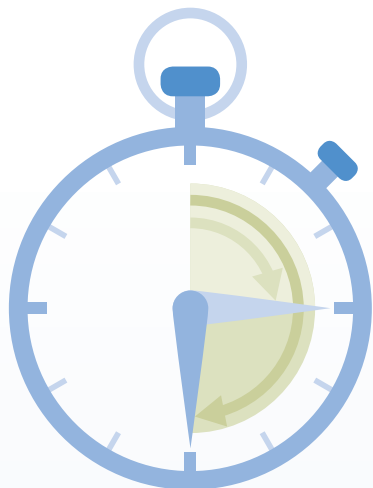


Wynik zgodny z metodą Westergrena
po 1 godzinie już
po 15 lub 30 minutach

Oszczędzaj czas
wybierając różne
czasy pomiaru

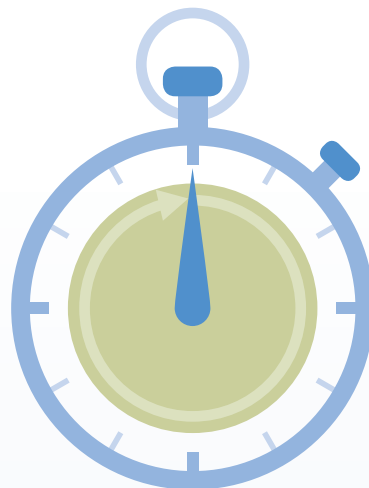

Wynik zgodny z metodą Westergrena
po 2 godzinach uzyskany
po 60 minutach

Trzy aparaty – praktyczne, bezpieczne, oszczędzające czas

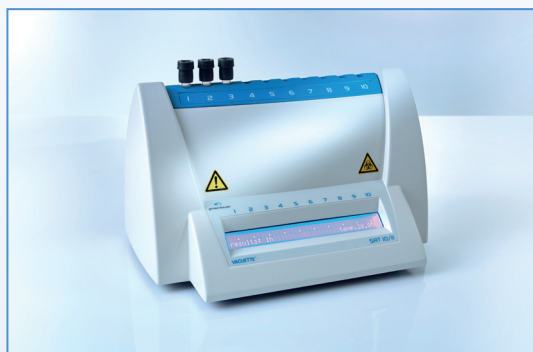

Kompaktowy – Sed Rate Timer 10/II

- 10 kanałów pomiarowych
- Gniazdo do podłączenia zewnętrznej drukarki
- Funkcja Auto-test
- Oszczędność czasu dzięki różnym czasom pomiaru
- Wydajność przy pomiarze 15 minutowym – 40 oznaczeń na godzinę
- Wydajność przy pomiarze 30 minutowym – 20 oznaczeń na godzinę



Sprawdzony, wszechstronny – Sed Rate Screener 20/II

- 20 kanałów pomiarowych
- Zintegrowana drukarka termiczna
- Funkcja przedstawiania krzywej opadu w formie graficznej
- Gniazda dla czytnika kodów i sieciowe
- Program kontroli jakości
- Funkcja Auto-test
- Oszczędność czasu dzięki różnym czasom pomiaru
- Wydajność przy pomiarze 15 minutowym – 80 oznaczeń na godzinę
- Wydajność przy pomiarze 30 minutowym – 40 oznaczeń na godzinę



„Big brother” – Sed Rate Screener 100/II

- 100 kanałów pomiarowych
- Wszystkie funkcje jak w SRS 20/II
- Wydajność przy pomiarze 15 minutowym – 400 oznaczeń na godzinę
- Wydajność przy pomiarze 30 minutowym – 200 oznaczeń na godzinę

Akcesoria



VACUETTE® MultiMixer

- Obrotowe mieszadło na 40 probówek
- Elastyczność pracy dzięki wyjmowanym statywom
- Różnej wielkości probówki mogą być mieszane równocześnie
- 4 różne programy mieszania do wyboru
- Czas mieszania nie powinien być krótszy niż 5 minut



Probówki z plastiku PP

- Do bezpiecznego pobierania krwi systemem **VACUETTE®**
- Probówki z nowego materiału, który zapewnia lepsze właściwości mieszania w porównaniu ze szkłem
- Bardzo trwała próżniowa probówka o objętości 1,5 ml
- Przydatność do użycia 12 miesięcy
- Przezroczysta etykieta z zaznaczonym minimalnym i maksymalnym poziomem pobrania



Czytnik kodów kreskowych

- Do szybkiej i łatwej identyfikacji próbek