


Automatyczna izolacja DNA i RNA z certyfikatem CE IVD

Maxwell® Clinical Sample Concentrator

Maxwell CSC

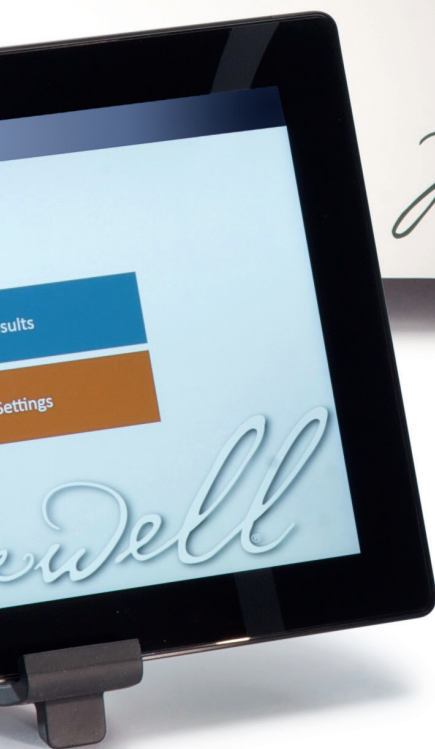

Maxwell® CSC

Automatyczna izolacja DNA i RNA z certyfikatem CE IVD

Maxwell® CSC (Clinical Sample Concentrator) został zaprojektowany specjalnie do analiz *in vitro* w diagnostyce molekularnej. Urządzenie, wyprodukowane zgodnie z wytycznymi GMP, służy do izolacji wysokiej jakości kwasów nukleinowych i gwarantuje powtarzalne wyniki przy użyciu odpowiednich zestawów z certyfikatem CE IVD. Zarówno urządzenie Maxwell® CSC, jak i zestawy odczynników Maxwell® CSC są zgodne z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu (UE) 2017/746 w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki *in vitro*.

Urządzenie z certyfikatem CE IVD umożliwia identyfikację i autoryzację użytkownika oraz zamieszczenie podpisu elektronicznego, a także zapewnia większe bezpieczeństwo i integralność danych. Parametry te odpowiadają wymaganiom regulacji FDA 21 CFR Part 11.

Maksymalna uniwersalność dzięki oprogramowaniu Dual Mode

Zintegrowane oprogramowanie Dual Mode pozwala na maksymalną uniwersalność w użytkowaniu urządzenia. Dzięki niemu urządzenie Maxwell® jest przystosowane nie tylko do analiz próbek diagnostycznych, ale również próbek do prac badawczych. Korzystanie z zestawów Maxwell® RSC RUO (Research Use Only) pozwala na izolację z szerokiej gamy materiałów wyjściowych. Zapewnia to uniwersalność zastosowania, jak również daje pewność, że urządzenie będzie przydatne w przyszłych eksperymentach. Wszystko to za pomocą jednego instrumentu!

Zestawy z certyfikatem CE IVD

Produkt	Nr kat.
Maxwell® CSC DNA FFPE Kit	AS1350
Maxwell® CSC RNA FFPE Kit	AS1360
Maxwell® CSC Blood DNA Kit	AS1321
Maxwell® CSC RNA Blood Kit	AS1410

Zestawy RUO zatwierdzone do pracy w Dual Mode

Produkt	Nr kat.
Maxwell® RSC Whole Blood DNA Kit	AS1520
Maxwell® RSC Viral TNA Kit	AS1330
Maxwell® RSC ccfDNA Plasma Kit	AS1480
Maxwell® RSC simplyRNA Tissue Kit	AS1340
Maxwell® RSC Buffy Coat DNA Kit	AS1540
Maxwell® RSC miRNA Plasma and Serum Kit	AS1680
Maxwell® RSC FFPE Plus DNA Kit	AS1720
Maxwell® RSC Tissue DNA Kit	AS1610
Maxwell® RSC Stabilized Saliva DNA Kit	AS1630
Maxwell® RSC Buccal Swab DNA Kit	AS1640
Maxwell® RSC miRNA Tissue Kit	AS1460

Zalety urządzenia Maxwell® CSC



Do wszystkich zastosowań

W trybie Dual Mode urządzenie może pracować zarówno z zestawami z certyfikatem CE IVD, jak i zestawami Maxwell® RSC, które tego certyfikatu nie posiadają. Dzięki temu znajduje ono zastosowanie zarówno w celach diagnostycznych (tryb CE IVD), jak i badawczych (tryb RUO).



Bezpieczeństwo wyników i danych

Czytnik kodów kreskowych i wbudowany system ich rejestrowania umożliwiają bezpieczne monitorowanie próbek, transfer danych na komputer lub integrację z systemem LIMS.



Dla każdego laboratorium

Urządzenia Maxwell® oczyszczają kwasy nukleinowe niezawodnie i szybko, zgodnie z wymaganiami Twojego laboratorium; bez względu na to czy izolujesz DNA lub RNA z 1 lub z 16 próbek, z próbek krwi lub wymazów, dla aplikacji diagnostycznych lub badawczych.



Szybko i łatwo

Intuicyjna obsługa za pomocą tabletu PC, minimalna konfiguracja przed rozpoczęciem pomiarów oraz zainstalowane, gotowe protokoły sprawiają, że szkolenie z obsługi urządzenia jest szybkie i łatwe.

Specyfikacja urządzenia

Nr kat.	AS6000
Liczba próbek w jednym cyklu izolacji	od 1 do 16 próbek
Czas trwania izolacji	28 – 80 minut (w zależności od rodzaju próbki i metody)
Objętość buforu elucyjnego	50 – 100 µl
Lampa UV do dekontaminacji	tak
Czytnik kodów kreskowych	tak
Waga	11 kg
Wymiary	33,0 x 34,5 x 29,9 cm (S x D x W)
Zasilanie	100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 2,5 A
Certyfikat CE IVD	tak

Dowiedz się więcej na:
www.promega.com/maxwell-ivd

Usługi serwisowe – Pełna obsługa techniczna urządzenia Maxwell®

Jest wiele rzeczy, o których trzeba pamiętać w codziennej pracy w laboratorium, ale o przegląd i serwis urządzeń Maxwell® nie trzeba się martwić, my zajmiemy się wszystkim.

Aby zapewnić pełną funkcjonalność urządzeń na najwyższym poziomie i przy rosnących wymaganiach medycznych, firma Promega oferuje liczne usługi serwisowe. Przegląd i naprawa urządzeń przeprowadzane są w naszym centrum serwisowym w Walldorf, Niemcy lub w laboratorium klienta przez technika firmy Promega. Wszystkie urządzenia objęte są standardową gwarancją przez pierwsze 12 miesięcy od daty zakupu. Jeżeli potrzebna jest dodatkowa usługa lub przedłużenie gwarancji po upływie pierwszego roku, można skorzystać z wielu opcji serwisowych.



Wszystkie opcje serwisowe

	Standardowa gwarancja (pierwsze 12 miesięcy)	Rozszerzona gwarancja (pierwsze 12 miesięcy)	Standardowa umowa serwisowa (na okres 1 roku po upływie gwarancji)	Rozszerzona umowa serwisowa (na okres 1 roku po upływie gwarancji)	Inspekcja urządzenia (Preventive Maintenance) (zalecana co 12 miesięcy)
Numer katalogowy	wliczona w cenę	SA1111	SA1110	SA1120	SA1130 (bez urządzenia zastępczego) SA1135 (z urządzeniem zastępczym)
Wszystkie części zamienne	✓	✓	✓	✓	✓
Robocizna	✓	✓	✓	✓	✓
Odbiór i wysyłka	✓	✓	✓	✓	✓
Urządzenie zastępcze na czas naprawy	✓ (w ciągu 5–7 dni)	✓ (w ciągu 1–2 dni)	✓ (w ciągu 5–7 dni)	✓ (w ciągu 1–2 dni)	✓ (tylko dla SA1135)
Inspekcja urządzenia (Preventive Maintenance)		✓		✓	✓
Możliwość naprawy lub inspekcji u klienta		✓		✓	✓ (za dodatkową opłatą)
Dokumentacja	✓	✓	✓	✓	✓

Promega GmbH

Gutenbergring 10
 69190 Walldorf, Niemcy
www.promega.com

Zamówienia

tel. +48 22 531 06 67
 fax +48 22 531 06 69
pl_custserv@promega.com

Doradztwo Techniczne

tel. +48 22 531 06 68
 fax +48 22 531 06 69
pl_techserv@promega.com

Dołącz do nas

@promegagmbh
 Promega Corporation
 Promega Corporation